

とっても小さくて薄いメタルブラケットです。

# フォスタデント マイクロ スプリント ブラケット

Micro Sprint® Brackets

Ni-Free\*



\*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。



## Micro Sprint-Brackets

フォレストアデント マイクロ スプリント ブラケット

マイクロ スプリント ブラケットは、ロープロファイルデザイン、審美性に優れたとっても小さなメタル ブラケットです。

Ni-Free\*\*




フォレストアデント スプリント ブラケットに新しくとっても小さなブラケットがラインアップされました。マイクロ スプリント ブラケットは、従来のミニ スプリント ブラケットと比較し、さらにサイズを縮小し、市場でも際立って小さく薄いメタル ブラケットとして誕生しました。



マイクロ スプリント ブラケットは、金属射出成形(MIM)によって単一のステンレス鋼(ニッケルフリー\*\*の原材料)から製造され、一般的な矯正歯科治療に使用されるワイヤー サイズを問題なく結紮することができます。ブラケットのスロットベースはフラットにデザインされていますので、効果的なローテーション コントロールを実現します。



特許となっているFORESTADENT フック・スタイル・ベースは、小さなブラケットにもかかわらず、良好なリテンションを提供します。FORESTADENT社ディボンディングブライヤー(C501-0828)を利用すると、アーチワイヤーを付けたまま撤去が可能。ブラケットベースの近遠心には斜面があり、これにより撤去時にブラケットを確実に保持することができます。

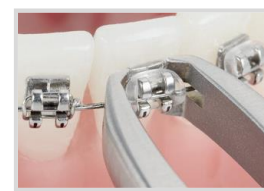

マイクロ スプリント ブラケットは、ロス システム\*、M/B/T システム\*の二つのテクニクが用意され、.018、.022スロット、そして犬歯、小臼歯にフックを選択することができます。また、5-5(20ブラケット)のセットは1症例、5症例、10症例のセットを用意しています。

950-0220		1	マイクロ スプリント ブラケット コンサルテーション モデル (上下顎)
----------	--	---	--------------------------------------

\*. The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.


\*\*・ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

# Micro Sprint®-Brackets

マイクロスプリントブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000  
販売名: フォレストアデント スプリント ブラケット  
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器

Ni-Free\*\*

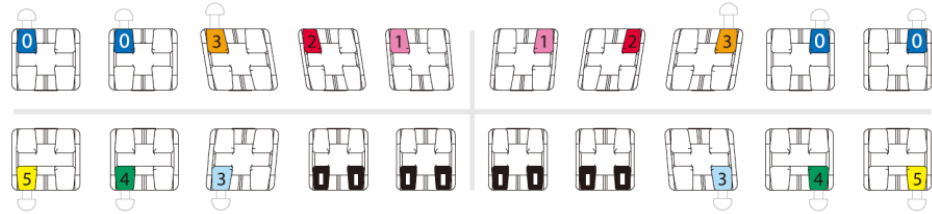

## Roth System\*

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+12	+5	0.7	-	784-0103	783-0103	784-0101	783-0101
2 側切歯	+8	+9	1.0	-	784-0203	783-0203	784-0201	783-0201
3 犬歯	-2	+11	0.5	4° mesial	784-0303	783-0303	784-0301	783-0301
	犬歯 フック付	-2	+11	0.5	4° mesial	784-0313	783-0313	784-0311
4+5 小臼歯	-7	0	0.5	2° distal	784-0503	783-0503	784-0501	783-0501
	小臼歯 フック付	-7	0	0.5	2° distal	784-0513	783-0513	784-0511

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	0	0	1.2	-	783-1203		783-1201	
3 犬歯	-11	+7	0.7	2° mesial	784-1403	783-1403	784-1401	783-1401
	犬歯 フック付	-11	+7	0.7	2° mesial	784-1413	783-1413	784-1411
4 小臼歯	-17	0	0.7	4° distal	784-1503	783-1503	784-1501	783-1501
	小臼歯 フック付	-17	0	0.7	4° distal	784-1513	783-1513	784-1511
5 小臼歯	-22	0	0.7	4° distal	784-1603	783-1603	784-1601	783-1601
	小臼歯 フック付	-22	0	0.7	4° distal	784-1613	783-1613	784-1611

## マイクロスプリントブラケット 5-5 セット

Roth System\*

	Slot .018			Slot .022		
	注文番号			注文番号		
	1症例セット	5症例セット	10症例セット	1症例セット	5症例セット	10症例セット
フックなし	706-1094	706-1095	706-1096	706-1103	706-1104	706-1105
犬歯フック付	706-1097	706-1098	706-1099	706-1106	706-1107	706-1108
犬歯・小臼歯フック付	706-1100	706-1101	706-1102	706-1109	706-1110	706-1111

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.


\*\*ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

# Micro Sprint®-Brackets

マイクロスプリントブラケット

医療機器認証番号: 221AKBZX00036000  
販売名: フォレストアデント スプリント ブラケット  
一般の名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器

Ni-Free\*\*

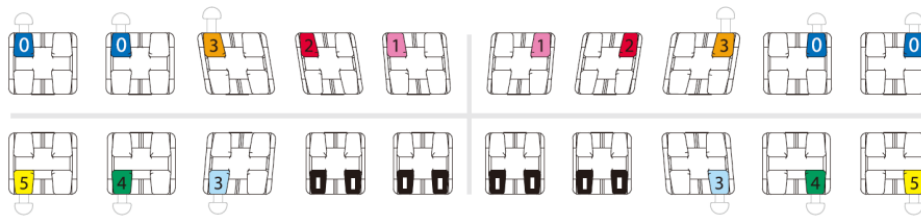

## McLaughlin/Bennett/Trevisi System\*

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	0.8	-	778-0103	777-0103	778-0101	777-0101
2 側切歯	+10	+8	1.0	-	778-0203	777-0203	778-0201	777-0201
3 犬歯	-7	+8	0.5	-	778-0303	777-0303	778-0301	777-0301
犬歯 フック付	-7	+8	0.5	-	778-0313	777-0313	778-0311	777-0311
4 小臼歯	-7	0	0.5	-	778-0403	777-0403	778-0401	777-0401
小臼歯 フック付	-7	0	0.5	-	778-0413	777-0413	778-0411	777-0411
5 小臼歯	-7	0	0.9	-	778-0503	777-0503	778-0501	777-0501
小臼歯 フック付	-7	0	0.9	-	778-0513	777-0513	778-0511	777-0511

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-6	0	1.2	-	777-1203		777-1201	
3 犬歯	-6	+3	0.7	-	778-1403	777-1403	778-1401	777-1401
犬歯 フック付	-6	+3	0.7	-	778-1413	777-1413	778-1411	777-1411
4 小臼歯	-12	+2	0.7	-	778-1503	777-1503	778-1501	777-1501
小臼歯 フック付	-12	+2	0.7	-	778-1513	777-1513	778-1511	777-1511
5 小臼歯	-17	+2	0.7	-	778-1603	777-1603	778-1601	777-1601
小臼歯 フック付	-17	+2	0.7	-	778-1613	777-1613	778-1611	777-1611

## マイクロスプリントブラケット5-5セット

### McLaughlin/Bennett/Trevisi System\*

	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	5症例セット	10症例セット	1症例セット	5症例セット	10症例セット
フックなし	706-1112	706-1113	706-1114	706-1121	706-1122	706-1123
犬歯フック付	706-1115	706-1116	706-1117	706-1124	706-1125	706-1126
犬歯・小臼歯フック付	706-1118	706-1119	706-1120	706-1127	706-1128	706-1129

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

\*\*ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレストアデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX.03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは...

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>