



## 歯科用熱可塑性3層シート

TAGLUS ULTRA


# タグラス ウルトラ シート

Taglus ウルトラは、一般的なリテーナー用の単層シートとは異なり、3層構造(ハード・ソフト・ハードのサンドイッチ構造)を0.762mmの薄さで実現しているシートです。

## 新発売特別セール

2026年7月1日～8月10日

All  
15%  
Off

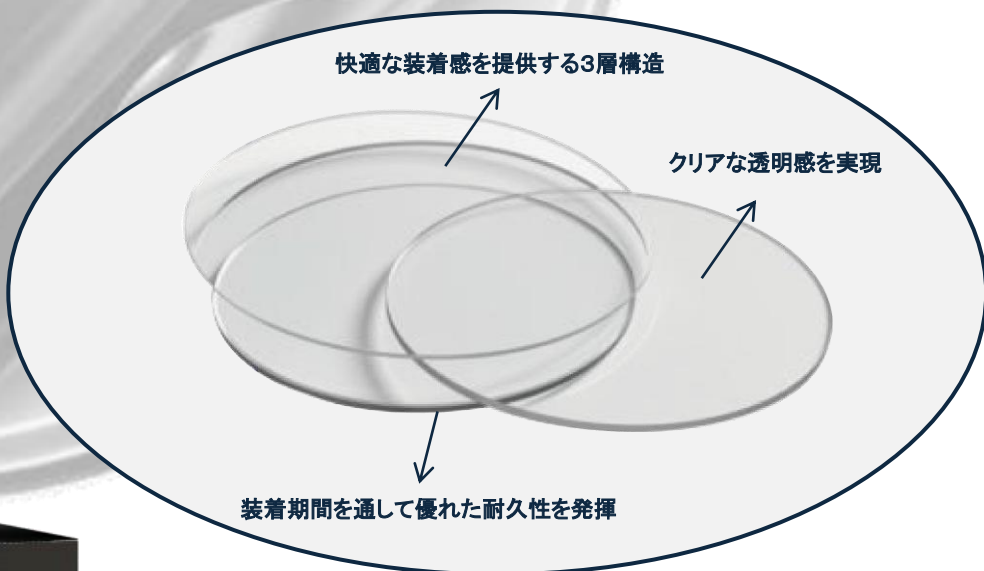

タグラス ウルトラ シートは硬い外層と、クッション効果を発揮する柔らかい内層から構成されています。

柔らかい内層は快適な装着感を提供します。また、クラック耐性に優れ、安定した保持力を発揮します。

硬い外層は、装置の剛性を高め、咬合ストレスに強く、さらには熱成形時の圧力に対する耐性を高めます。

その他のシートは裏面を参照ください。

- タグラス ウルトラ シート
- サイズ(厚み) : 0.762 mm
- 内容量 : 100枚 / 20枚 入り
- シート径 : 125mm
- シート素材: PETG / TPU / PETG

届出番号: 13B1X10233F00093  
販売名: Taglus ウルトラ  
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料  
一般医療機器

タグラス製品  
新発売特別セール注文書  
2026年7月1日～8月10日



フォレストudent・ジャパン株式会社 行き

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名	
〒 —	
電話 ( )	FAX ( )
Mail @	

注文番号		サイズ	素材	入数	単位	注文数
VS812	Taglus Ultra Thermoforming Foils タグラス ウルトラ シート	0.762mm	PETG/TPU/PETG	100	bx	
VS812J				20	pk	
VS017	Taglus Premium Thermoforming Foils タグラス プレミアム	0.45mm	PETG	100	bx	
VS019		0.76mm	PETG	100	bx	
VS272	Taglus PuFlex Thermoforming Foils タグラス PU フレックス	0.45mm	PU	100	bx	
VS280		0.762mm	PU	100	bx	
VS098	Taglus Tuff Thermoforming Foils タグラス タフ	0.8mm	PETG	50	bx	
VS099		0.9mm	PETG	50	bx	



### Taglus プレミアム

PET に特殊グレードのグリコールを添加したことで加熱中に見られる曇りのない仕上がりとなります。また優れた耐久性をもち、両面のマスキングシートにより、傷が付きにくく、耐湿性があり、保存期間が長くなります。

届出番号: 13B1X10233F00091  
販売名: Taglus プレミアム  
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料  
一般医療機器



### Taglus PU フレックス

柔軟なセグメントと硬いセグメントが交互に並んだ線形ポリマー鎖で構成された均質ポリウレタン シートです。優れた柔軟性、強度、耐久性を備え、装着者に快適さも提供する高性能の素材です。また、ライナー矯正に欠かせないアタッチメントを装着するトランスファープレートとして最適なシートです。

届出番号: 13B1X10233F00085  
販売名: Taglus PU フレックス  
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料  
一般医療機器



### Taglus タフ

PET に特殊グレードのグリコールを添加したことで加熱中に見られる曇りのない仕上がりとなります。また、グリコールを配合することで快適で扱いやすい装置を作製できます。Taglus タフ は、強度と硬さ、透明度を融合させた独自のシートです。

届出番号: 13B1X10233F00087  
販売名: Taglus タフ  
一般的名称: 歯科咬合スプリント用材料  
一般医療機器

WEB Order



info.fdj@forestadent.co.jp



03-6277-6980



FAX 03-3568-8864