

McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

製品カタログ



GLAM®-Brackets

グラム セラミックブラケット




Mini Sprint® II -Brackets

ミニスプリントII メタルブラケット

優れた審美性と、イージー ディボンディングが融合したセラミック ブラケット



GLAM:
魅力的な、華やかな、の意味を持つ
"Glamorous" から名づけました。

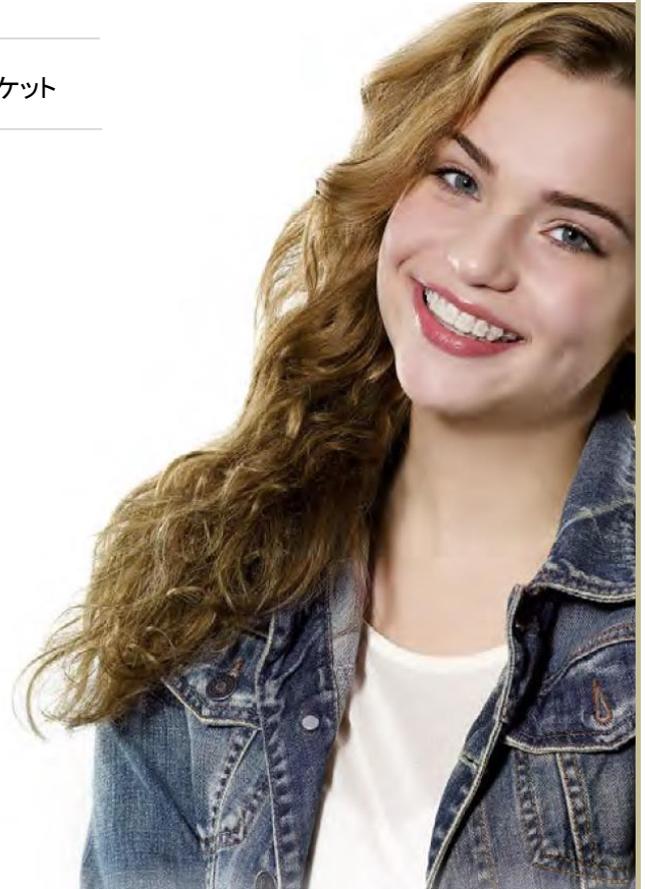

グラム セラミック ブラケットの持つ乳白色の色合いは、患者さんがもつ歯牙の自然なシェードと調和し、優れた審美性を発揮します。

グラム セラミック ブラケットにはプラスチック素材は一切使用されていないため、吸水による変色はありません。また治療中に起こるブラケットの破折を極力なくし、治療期間中を通して常に美しい状態を保つように独自のブラケット デザインを採用しています。

グラム セラミック ブラケットに新たにカラーIDマーキングを採用。ボンディング時のポジショニングに役立つスロット部にもカラーマーキングを施しました。



セラミック ブラケットの美しい審美性は多くの矯正歯科医がその利点を認めています。しかし、ブラケット撤去時に、セラミック素材が破折したり、歯面に一部が残るリスクについても多くの矯正歯科医が抱えている問題です。

グラム セラミック ブラケットには専用のディボンディングツールをご用意しています。このツールはディボンディング時のブラケットの破折のリスクを軽減し、よりイージーで安全なブラケット撤去を可能にします。

C501-0815	 <p>届出番号: 13B2X10094F00001 販売名: フォレストudent プライヤー 一般的名称: 歯科矯正用プライヤー 一般医療機器</p>	1	グラム セラミック ブラケット / クイックリアー セルフライゲーション ブラケット 共用ディボンディングツール DE (ダブルエンド) オートクレーブ滅菌対応
G950-1000		1	グラム セラミック ブラケット 患者コンサルテーション モデル


McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

GLAM[®]-Brackets

フォレストアデント グラム セラミックブラケット

医療機器認証番号: 224AKBZX00003000
販売名: フォレストアデント グラム ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

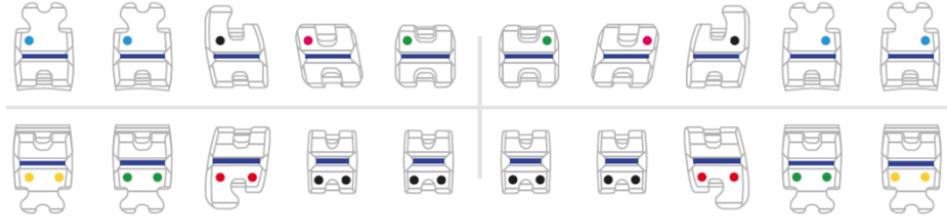

McLaughlin Bennett 5.0

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	1.25	-	G762T0103	G761T0103	G762T0101	G761T0101
2 側切歯	+10	+8	1.5	-	G762T0203	G761T0203	G762T0201	G761T0201
3 犬歯	-7	+8	1.0	-	G762T0303	G761T0303	G762T0301	G761T0301
	犬歯 フック付	-7	+8	1.0	-	G762T0313	G761T0313	G762T0311
3 犬歯	0	+8	1.0	-	G762T0323	G761T0323	G762T0321	G761T0321
	犬歯 フック付	0	+8	1.0	-	G762T0333	G761T0333	G762T0331
4+5 小臼歯	-7	0	1.0	-	G762T0503	G761T0503	G762T0501	G761T0501
	小臼歯 フック付	-7	0	1.0	-	G762T0513	G761T0513	G762T0511

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-6	0	1.5	-	G761T1203		G761T1201	
3 犬歯	-6	+3	1.0	-	G762T1403	G761T1403	G762T1401	G761T1401
	犬歯 フック付	-6	+3	1.0	-	G762T1413	G761T1413	G762T1411
3 犬歯	0	+3	1.0	-	G762T1423	G761T1423	G762T1421	G761T1421
	犬歯 フック付	0	+3	1.0	-	G762T1433	G761T1433	G762T1431
4 小臼歯	-12	0	0.7	-	G761T1503	G761T1503	G761T1501	G761T1501
	小臼歯 フック付	-12	0	0.7	-	G761T1513	G761T1513	G761T1511
5 小臼歯	-17	0	0.7	-	G761T1603	G761T1603	G761T1601	G761T1601
	小臼歯 フック付	-17	0	0.7	-	G761T1613	G761T1613	G761T1611


McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

GLAM®-Brackets

フォレストudent グラム セラミック ブラケット

医療機器認証番号: 224AKBZX00003000
販売名: フォレストudent グラム ブラケット
一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

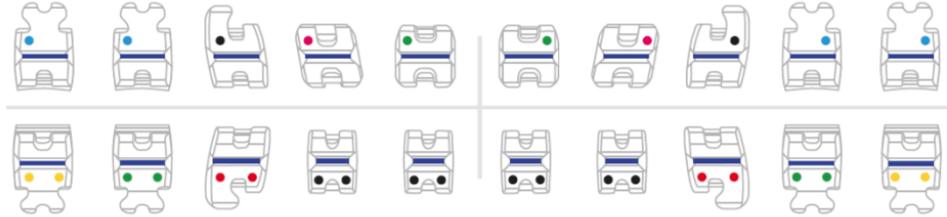

フォレストudent グラム セラミック ブラケット 5-5 セット McLaughlin Bennett 5.0

犬歯ブラケットトルク付	Slot .018		Slot .022	
	注文番号		注文番号	
	1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
フックなし	G706T0759	G706T0760	G706T0735	G706T0736
犬歯フック付	G706T0762	G706T0763	G706T0740	G706T0741
犬歯・小臼歯フック付	G706T0765	G706T0766	G706T0745	G706T0746



フォレストudent グラム セラミック ブラケット 5-5 セット McLaughlin Bennett 5.0

犬歯ブラケット 0° トルク	Slot .018		Slot .022	
	注文番号		注文番号	
	1症例セット	3症例セット	1症例セット	3症例セット
フックなし	G706T0773	G706T0774	G706T0767	G706T0768
犬歯フック付	G706T0775	G706T0776	G706T0769	G706T0770
犬歯・小臼歯フック付	G706T0777	G706T0778	G706T0771	G706T0772

FORESTADENT社による高度なMIM技術により卓越した精度を持ったメタルブラケットです





ヨーロッパでメタルブラケットのベストセラーとなっている一体型のミニ スプリントを、新たにMcLaughlin Bennett 5.0 システムにアップデートしミニ スプリントII としてリリース。ベースコンター、ローフックデザインなどの改善に加え、IN/OUTの修正、犬歯0° トルクの追加などにより、最新のMB5.0スペックにマッチしたブラケットです。

ミニ スプリントからミニ スプリントII ブラケットへ - FORESTADENTでは従来のミニ スプリントの基本デザインはそのままに、最新のMcLaughlin Bennett 5.0 システムによる治療メカニクスの効果を臨床において十分に発揮できるアプライアンスとなりました。

主な改善点は:

- 1、ブラケットベースのアライメントの変更
- 2、タイウイング下のスペースを確保したまま、ブラケットのロープロファイル化を実現
- 3、装着時の快適性の向上のため、フックのデザイン変更と、ブラケットをより丸みのあるデザインに変更
- 4、確実な接着強度のために、コンターベース デザインの改善

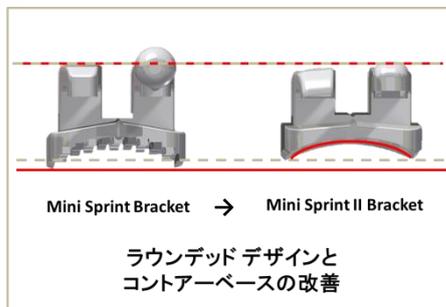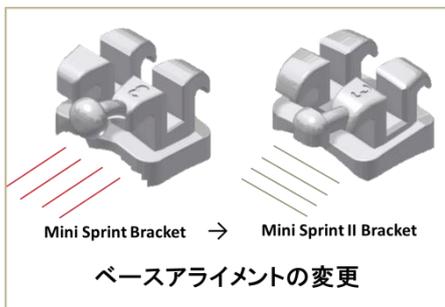

950T0210



1

ミニスプリント II ブラケット
患者コンサルテーション モデル


McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

Mini Sprint® II -Brackets

ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号:221AKBZX00036000
販売名:フォレストデントスプリントブラケット
一般的名称:歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

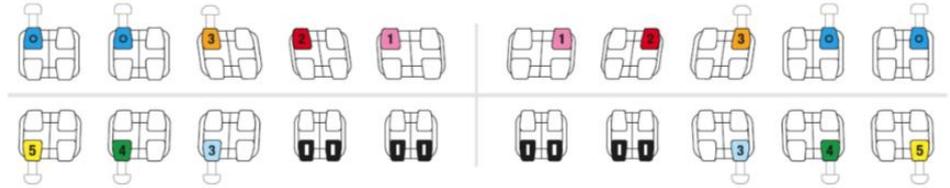

McLaughlin Bennett 5.0

1 PK (10個入)

上 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1 中切歯	+17	+4	1.05	-	780T0103	779T0103	780T0101	779T0101
2 側切歯	+10	+8	1.25	-	780T0203	779T0203	780T0201	779T0201
3 犬歯	-7	+8	0.6	-	780T0313	779T0313	780T0311	779T0311
	犬歯 フック付	-7	+8	0.6	-	780T0303	779T0303	780T0301
3 犬歯	0	+8	0.6	-	780T0333	779T0333	780T0331	779T0331
	犬歯 フック付	0	+8	0.6	-	780T0323	779T0323	780T0321
4+5 小臼歯	-7	0	0.8	-	780T0413	779T0413	780T0411	779T0411
	小臼歯 フック付	-7	0	0.8	-	780T0403	779T0403	780T0401

下 顎					Slot .018		Slot .022	
Tooth	Torque	Angulation	In/out	Rotation	注文番号		注文番号	
					Right	Left	Right	Left
1+2 下顎前歯	-1	0	1.3	-	780T1223		780T1221	
	-6	0	1.3	-	780T1203		780T1201	
3 犬歯	-6	+3	0.6	-	780T1413	779T1413	780T1411	779T1411
	犬歯 フック付	-6	+3	0.6	-	780T1403	779T1403	780T1401
3 犬歯	0	+3	0.6	-	780T1433	779T1433	780T1431	779T1431
	犬歯 フック付	0	+3	0.6	-	780T1423	779T1423	780T1421
4 小臼歯	-12	+2	0.65	-	780T1513	779T1513	780T1511	779T1511
	小臼歯 フック付	-12	+2	0.65	-	780T1503	779T1503	780T1501
5 小臼歯	-17	+2	0.65	-	780T1613	779T1613	780T1611	779T1611
	小臼歯 フック付	-17	+2	0.65	-	780T1603	779T1603	780T1601

*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。


McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

Mini Sprint® II -Brackets

ミニ スプリント II メタル ブラケット

医療機器認証番号:221AKBZX00036000
販売名:フォレストデントスプリントブラケット
一般的名称:歯列矯正用アタッチメント
管理医療機器

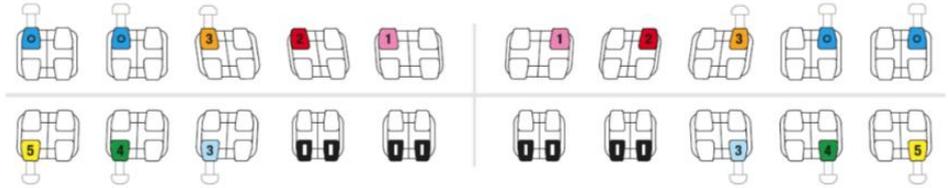

ミニ スプリント II メタル ブラケット 5-5 セット

McLaughlin Bennett 5.0

犬歯ブラケットトルク付	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706T1031	706T1032	706T1033	706T1046	706T1047	706T1048
犬歯フック付	706T1036	706T1037	706T1038	706T1051	706T1052	706T1053
犬歯・小臼歯フック付	706T1041	706T1042	706T1043	706T1056	706T1057	706T1058

ミニ スプリント II メタル ブラケット 5-5 セット

McLaughlin Bennett 5.0

犬歯ブラケット 0° トルク	Slot .018			Slot .022		
	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット	1症例セット	注文番号 5症例セット	10症例セット
フックなし	706T1060	706T1061	706T1062	706T1069	706T1070	706T1071
犬歯フック付	706T1063	706T1064	706T1065	706T1072	706T1073	706T1074
犬歯・小臼歯フック付	706T1066	706T1067	706T1068	706T1075	706T1076	706T1077

*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

チューリップ バッカルチューブ

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	ラージベース 注文番号		"ピックフット"ベース 注文番号	
						右	左	右	左
	6 6 7 7	-14	-	10	.018	743T0744	742T0744	743B0744	742B0744
					.022	743T0742	742T0742	743B0742	742B0742
	6 6	-20	-	0	.018	743T1714	742T1714	743B1714	742B1714
					.022	743T1712	742T1712	743B1712	742B1712
	7 7	-10	-	0	.018	742T0724	743T0724	742B0724	743B0724
					.022	742T0722	743T0722	742B0722	743B0722

1 PK (10個入)

コンフォートライン 3D バッカルチューブ

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	インデントなし 注文番号		インデント付 注文番号	
						右	左	右	左
	6 6 7 7	-14	-	12	.018	728M0804	727M0804	728K0804	727K0804
					.022	728M0802	727M0802	728K0802	727K0802
	6 6	-20	-	0	.018	728M1714	727M1714	728K1714	727K1714
					.022	728M1712	727M1712	728K1712	727K1712
	7 7	-10	-	0	.018	728M1804	727M1804	728K1804	727K1804
					.022	728M1802	727M1802	728K1802	727K1802

1 PK (10個入)

コンフォートライン 3D ミニ バッカルチューブ

	tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	1 PK (10個入)	
						右	左
	7 7	-14	-	4	.018	728-0814	727-0814
					.022	728-0812	727-0812
	7 7	-10	-	0	.018	728-1814	727-1814
					.022	728-1812	727-1812

*- ニッケルの含有量は0.3%以下となっています。

Comfort Line buccal tubes

フォレスタデント コンフォートライン バッカルチューブ

医療機器認証番号: 221AKBZX00015000
販売名: フォレスタデント バッカルチューブ
一般的名称: 歯列矯正用チューブ
管理医療機器

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*

標準価格はすべて1PK(10個入)の価格です。 1 PK (10個入)

tooth	Torque	Ang.	Offset	Slot	Base	注文番号		Base	注文番号	
						右	左		右	左
6 6  コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウェルド用	728-0713	727-0713	ダイレクト用 スタンダードベース	728-0714	727-0714
				.022		728-0711	727-0711		728-0712	727-0712
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	-	-	-	-	-
				.022		-	-	-	-	
6 6  コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウェルド用	728-0727	727-0727	ダイレクト用 スタンダードベース	728-0728	727-0728
				.022		728-0725	727-0725		728-0726	727-0726
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	-	-	-	-	-
				.022		728B0726	727B0726	-	-	
7 7  コンバーチブル	-14	0	10	.018	ウェルド用	728-0803	727-0803	ダイレクト用 スモールベース	728-0804	727-0804
				.022		728-0801	727-0801		728-0802	727-0802
	-14	0	10	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	728B0804	727B0804	ダイレクト用 スタンダードベース	728L0804	727L0804
				.022		728B0802	727B0802		728L0802	727L0802
6 6  コンバーチブル	-20	0	0	.018	ウェルド用	728-1703	727-1703	ダイレクト用 スタンダードベース	728-1704	727-1704
				.022		728-1701	727-1701		728-1702	727-1702
	-20	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	728B1704	728B1704	-	-	-
				.022		728B1702	727B1702	-	-	
7 7  コンバーチブル	-10	0	0	.018	ウェルド用	728-1803	727-1803	ダイレクト用 スモールベース	728-1804	727-1804
				.022		728-1801	727-1801		728-1802	727-1802
	-10	0	0	.018	ダイレクト用 "ビッグフット"ベース	728B1804	727B1804	ダイレクト用 スタンダードベース	728L1804	727L1804
				.022		728B1802	727B1802		728L1802	727L1802

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

Forestadent Molar Band - フォレスタデント バンド プリウエルド

医療機器認証番号: 231AKBZX00024000
販売名: フォレスタデント バンドプリウエルド
一般的名称: 歯列矯正用帯環
管理医療機器

McLaughlin/Bennett/Trevisi-System*

1 PK (5個入)

Teeth	バッカルチューブ スロットサイズ: .022	各サイズごと5個入り		スターターキット		
		右	左	100個入 (L50 / R50)	200個入 (L100 / R100)	400個入 (L200 / R200)
6 6 		D728-0711UR05 ~ D728-0711UR36 バンドサイズは05 - 36 までの32サイズ	D727-0711UL05 ~ D727-0711UL36 バンドサイズは05 - 36 までの32サイズ	D727/728- 0711100	D727/728- 0711200	D727/728- 0711400
6 6 		D728-1701LR05 ~ D728-1701LR36 バンドサイズは05 - 36 までの32サイズ	D727-1701LL05 ~ D727-1701LL36 バンドサイズは05 - 36 までの32サイズ	D727/728- 1701100	D727/728- 1701200	D727/728- 1701400

- バンドサイズ等は担当営業にお問い合わせください。
- バンドPWキットの納期は受注後1カ月から2カ月となりますので予めご了承ください。

McLaughlin Bennett 5.0 – Ni-Ti & SS ArchWires


ニッケルチタン & ステンレススチール アーチ ワイヤー

医療機器認証番号: 221AKBZX00032000
販売名: フォレストアデント ニッケルチタン ワイヤー
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器

医療機器認証番号: 230AKBZX00022000
販売名: フォレストアデント SS アーチワイヤー
一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ
管理医療機器

McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

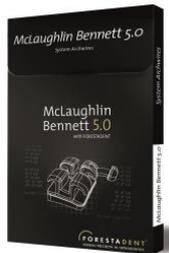

1 PK (10本入)

アーチワイヤー	プロファイル	サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号	
			上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎
			Nickel Titanium – Heat Activated ヒートアクティベイトド ニッケルチタン ワイヤー		.014	208H0835	208H0935	208H1835
		.016	208H0840	208H0940	208H1840	208H1940	208H2840	208H2940
		.016 x .022	208H2040	-	208H3040	208H3140	208H4040	208H4140
		.017 x .025	208H2044	-	208H3044	208H3144	208H4044	208H4144
		.019 x .025	208H2048	208H2148	208H3048	208H3148	208H4048	208H4148

アーチワイヤー	プロファイル	サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号	
			上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎
			Stainless Steel ステンレススチール ワイヤー		.014	202-0835	202-0935	202-1835
		.016	202-0840	202-0940	202-1840	202-1940	202-2840	202-2940

アーチワイヤー	プロファイル	サイズ inch	注文番号		注文番号		注文番号	
			上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎
			SS Heat Treated ステンレススチール ヒートトリートド ワイヤー		.018	202H0845	202H0945	202H1845
		.020	202H0850	202H0950	202H1850	202H1950	202H2850	202H2950
		.019 x .025	202H2048	202H2148	202H3048	202H3148	202H4048	202H4148

McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT

注文番号			
435-0007		set	アーチワイヤーテンプレート (テーパード / オーボイド / スクエア アーチフォーム)
100E0043		1	ブラケットポジショニングチャート
200-0005		1	アーチワイヤーホルダー (2段 - 6PK収納)
200-0006	 <p data-bbox="571 1357 767 1384">写真は4段-8PK収納用です。</p>	1	アーチワイヤーホルダー (4段 - 8PK収納)

G950-1000		1	グラム セラミック ブラケット 患者コンサルテーション モデル
950T0210		1	ミニスプリントII ブラケット 患者コンサルテーション モデル

McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT



... the only philosophy which offers a comprehensive system – it includes a range of high quality brackets, precise information on where to place those brackets, and full information on arch form and force levels. All of this is backed up with best-selling textbooks.

包括的なシステムを提供する唯一のフィロソフィーです。
それらは、高品質なブラケットと、それらの高精度なポジショニングについての情報、
そしてアーチフォームと矯正力に関する確かな情報が含まれています。
そしてこれらのすべては情報はベストセラーとなった書籍でバックアップされています。

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

製造販売元 **フォレスタデント・ジャパン株式会社**

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品・その他のお問い合わせは・・・

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>