

# TruKlear<sup>®</sup>-Brackets

オールセラミック セルフライゲーション ブラケット

## トゥルークリアー



メタル材を一切使用しない真に審美性に優れた  
セルフライゲーション セラミック ブラケット

## TruKlear®-Brackets

トゥルークリアー オール セラミック セルフライゲーション ブラケット




トゥルークリアーは金属材料を一切使用していません。本体内部のメカニズムにも金属材料を使用していないため、金属材料が透けて審美性を損なうことはありません。セルフライゲーション ブラケットとして最大限の審美性を実現しました。



スロットは.018"、または.022" からご選択できます。トルクコントロールを的確に行うため、トゥルークリアーのスロット高は.025" となっています。優れたトルクの効果を得るために、早い段階で大きなサイズのワイヤー（例えば.014 x.025または.016 x.025）を使用することを推奨します。



トゥルークリアーのセルフライゲーション機能はとてもシンプルです。スライダーを歯肉側方向にスライドさせて開き、“クリック”感によってスライダーの開閉を正確に知ることができます。また本体内部にある開閉メカニズムはシンプルな構造で、金属材料を一切使用していないため常に高い審美性を保つことができます。

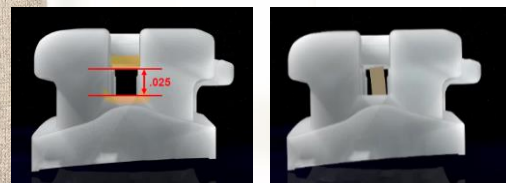


スライダーはフリクションを少なくするために本体とは2箇所のみで接触しており、接触ポイントは安定性を得るため最大限低い位置になっています。ブラケット表面から見えるスライダーの幅は狭く見えますが、スロット側のスライダーの幅は十分広く、効果的なローテーションコントロールを可能とします。



## TruKlear®-Brackets

トウルークリアー オール セラミック セルフライゲーション ブラケット

医療機器認証番号: 226AKBZX00113000  
販売名: フォレストデント トウルークリアー ブラケット  
一般の名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器

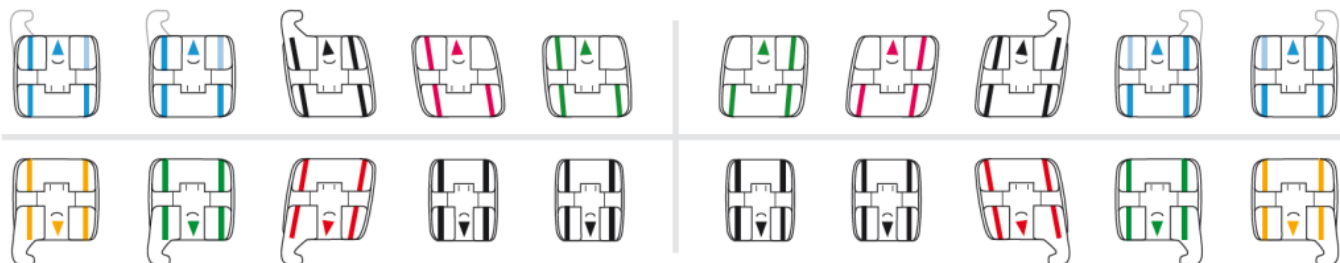

### Roth System\*

1 PK (10個入)

| 上 顎          |        |            |        |           | Slot .018 |           | Slot .022 |           |
|--------------|--------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tooth        | Torque | Angulation | In/out | Rotation  | 注文番号      |           | 注文番号      |           |
|              |        |            |        |           | Right     | Left      | Right     | Left      |
| 1 中切歯        | +12    | +5         | 0.9    | -         | C713-0103 | C712-0103 | C713-0101 | C712-0101 |
| 2 側切歯        | +8     | +9         | 1.1    | -         | C713-0203 | C712-0203 | C713-0201 | C712-0201 |
| 3 犬歯 フック付    | -2     | +11        | 0.7    | 4° mesial | C713-0313 | C712-0313 | C713-0311 | C712-0311 |
| 小白歯          | -7     | 0          | 0.7    | 2° distal | C713-0503 | C712-0503 | C713-0501 | C712-0501 |
| 4+5 小白歯 フック付 | -7     | 0          | 0.7    | 2° distal | C713-0513 | C712-0513 | C713-0511 | C712-0511 |

| 下 顎        |        |            |        |           | Slot .018 |           | Slot .022 |           |
|------------|--------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tooth      | Torque | Angulation | In/out | Rotation  | 注文番号      |           | 注文番号      |           |
|            |        |            |        |           | Right     | Left      | Right     | Left      |
| 1+2 下顎前歯   | 0      | 0          | 1.4    | -         | C712-1203 |           | C712-1201 |           |
| 3 犬歯 フック付  | -11    | +7         | 1.2    | 2° mesial | C713-1413 | C712-1413 | C713-1411 | C712-1411 |
| 小白歯        | -17    | 0          | 1.2    | 4° distal | -         | -         | -         | -         |
| 4 小白歯 フック付 | -17    | 0          | 1.2    | 4° distal | C713-1513 | C712-1513 | C713-1511 | C712-1511 |
| 小白歯        | -22    | 0          | 1.2    | 4° distal | -         | -         | -         | -         |
| 5 小白歯 フック付 | -22    | 0          | 1.2    | 4° distal | C713-1613 | C712-1613 | C713-1611 | C712-1611 |

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.




*Precious. Unique. Metal-free.  
TruKlear® perfects aesthetics*



## TruKlear®-Brackets

トウルークリアー オール セラミック セルフライゲーション ブラケット

医療機器認証番号: 226AKBZX00113000  
販売名: フォレストデント トウルークリアー ブラケット  
一般の名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器

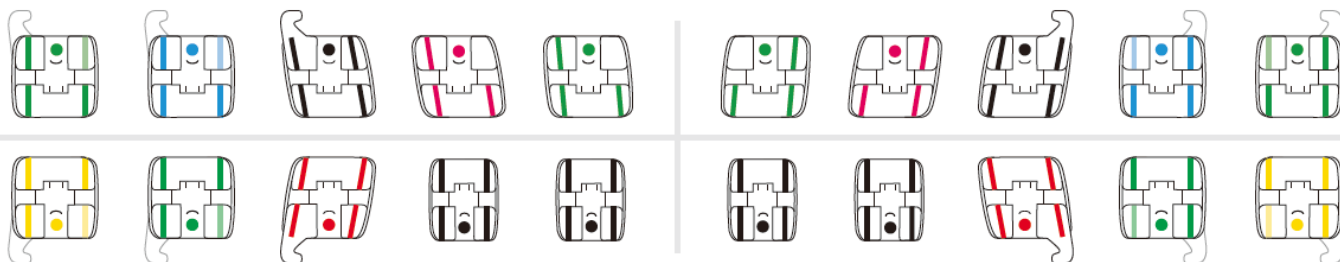

## McLaughlin/Bennett/Trevisi System\*

1 PK (10個入)

| 上 顎       |        |            |        |          | Slot .018 |           | Slot .022 |           |
|-----------|--------|------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tooth     | Torque | Angulation | In/out | Rotation | 注文番号      |           | 注文番号      |           |
|           |        |            |        |          | Right     | Left      | Right     | Left      |
| 1 中切歯     | +17    | +4         | 0.9    | -        | C715-0103 | C714-0103 | C715-0101 | C714-0101 |
| 2 側切歯     | +10    | +8         | 1.1    | -        | C715-0203 | C714-0203 | C715-0201 | C714-0201 |
| 3 犬歯 フック付 | -7     | +8         | 0.7    | -        | C715-0313 | C714-0313 | C715-0311 | C714-0311 |
| 4 小臼歯     | -7     | 0          | 0.7    | -        | C715-0403 | C714-0403 | C715-0401 | C714-0401 |
|           | -7     | 0          | 0.7    | -        | C715-0413 | C714-0413 | C715-0411 | C714-0411 |
| 5 小臼歯     | -7     | 0          | 1.0    | -        | C715-0503 | C714-0503 | C715-0501 | C714-0501 |
|           | -7     | 0          | 1.0    | -        | C715-0513 | C714-0513 | C715-0511 | C714-0511 |

| 下 顎       |        |            |        |          | Slot .018 |           | Slot .022 |           |
|-----------|--------|------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tooth     | Torque | Angulation | In/out | Rotation | 注文番号      |           | 注文番号      |           |
|           |        |            |        |          | Right     | Left      | Right     | Left      |
| 1+2 下顎前歯  | -6     | 0          | 1.4    | -        | C714-1203 |           | C714-1201 |           |
| 3 犬歯 フック付 | -6     | +3         | 1.2    | -        | C715-1413 | C714-1413 | C715-1411 | C714-1411 |
| 4 小臼歯     | -12    | +2         | 1.2    | -        | -         | -         | -         | -         |
|           | -12    | +2         | 1.2    | -        | C715-1513 | C714-1513 | C715-1511 | C714-1511 |
| 5 小臼歯     | -17    | +2         | 1.2    | -        | -         | -         | -         | -         |
|           | -17    | +2         | 1.2    | -        | C715-1613 | C714-1613 | C715-1611 | C714-1611 |

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.




*There has simply never been  
so much aesthetics.*



## TruKlear®-Brackets

トウルークリアー オール セラミック セルフライゲーション ブラケット

医療機器認証番号: 226AKBZX00113000  
販売名: フォレストデント トウルークリアー ブラケット  
一般の名称: 歯列矯正用アタッチメント  
管理医療機器

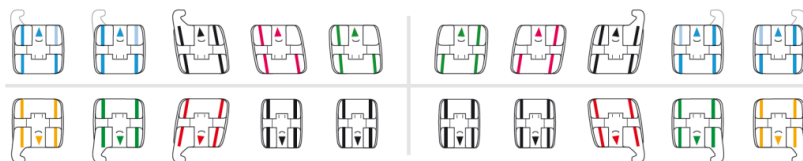


トウルークリアー オール セラミック セルフライゲーション ブラケット

5-5 セット

Roth System\*

|         |                                                                                         | Slot .018 |           |           | Slot .022 |           |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                                                                         | 注文番号      |           |           | 注文番号      |           |           |
|         |                                                                                         | 1症例セット    | 3症例セット    | 6症例セット    | 1症例セット    | 3症例セット    | 6症例セット    |
| 上顎 5-5  |  3     | C706-2000 | C706-2001 | C706-2002 | C706-2006 | C706-2007 | C706-2008 |
|         |  3-5   | C706-2003 | C706-2004 | C706-2005 | C706-2009 | C706-2010 | C706-2011 |
| 上下顎 5-5 |  3   | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|         |  3-5 | C706-2027 | C706-2028 | -         | C706-2033 | C706-2034 | -         |

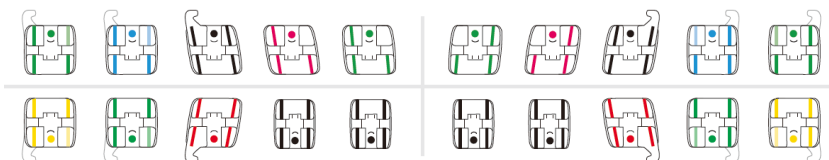

トウルークリアー オール セラミック セルフライゲーション ブラケット

5-5 セット

McLaughlin/Bennett/Trevisi System\*

|         |                                                                                         | Slot .018 |           |           | Slot .022 |           |           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                                                                         | 注文番号      |           |           | 注文番号      |           |           |
|         |                                                                                         | 1症例セット    | 3症例セット    | 6症例セット    | 1症例セット    | 3症例セット    | 6症例セット    |
| 上顎 5-5  |  3   | C706-2012 | C706-2013 | C706-2014 | C706-2018 | C706-2019 | C706-2020 |
|         |  3-5 | C706-2015 | C706-2016 | C706-2017 | C706-2021 | C706-2022 | C706-2023 |
| 上下顎 5-5 |  3   | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
|         |  3-5 | C706-2039 | C706-2040 | -         | C706-2045 | C706-2046 | -         |

\*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

## TruKlear bracket accessories

トゥルークリアーブラケットアクセサリ



|           |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C501-1842 |    | 1 | <p>届出番号: 13B1X10233F00002<br/>販売名: フォレストアドेंट ディレクター<br/>一般的名称: 歯科矯正用結さつ器<br/>一般医療機器</p> <p><b>トゥルークリアー ディレクター</b><br/>オートクレーブ滅菌対応</p>                                            |
| 501-0861  |    | 1 | <p>届出番号: 13B1X10233F00002<br/>販売名: フォレストアドेंट ディレクター<br/>一般的名称: 歯科矯正用結さつ器<br/>一般医療機器</p> <p><b>アーチワイヤー ディレクター</b><br/>オートクレーブ滅菌対応</p>                                             |
| C501-0815 |   | 1 | <p>届出番号: 13B1X10233F00001<br/>販売名: フォレストアドेंट プライヤー<br/>一般的名称: 歯科矯正用プライヤー<br/>一般医療機器</p> <p><b>トゥルークリアー<br/>セルフライゲーション ブラケット<br/>ディボンディング ツール DE (ダブルエンド)</b><br/>オートクレーブ滅菌対応</p> |
| C501-0828 |  | 1 | <p>届出番号: 13B1X10233F00001<br/>販売名: フォレストアドेंट プライヤー<br/>一般的名称: 歯科矯正用プライヤー<br/>一般医療機器</p> <p><b>ブラケット リムービング プライヤー ノッチ付</b><br/>ワイヤーを装着したままブラケット撤去が可能です。</p>                       |
| C950-0247 |  | 1 | <p><b>トゥルークリアー コンサルテーション モデル</b></p>                                                                                                                                              |

**FORESTADENT®**  
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

ドイツ FORESTADENT 社 日本総代理店・製造販売元

フォレストアドेंट・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品・その他のお問い合わせは・・・

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>