

歯列矯正用咬合誘導装置 オーソ テイン

healthystart by ORTHO-TAIN®

医療機器認証番号:303AKBZX00109000
販売名:オーソ テイン
一般的名称:歯列矯正用咬合誘導装置
管理医療機器



オーソ テイン(Ortho-Tain®)は、幼児期(2歳)からの早い年齢層も含め、成人(永久歯)までも含めた幅広い年齢層の習慣的な問題に対処するように設計された装置を開発しています。患者さんの年齢に合わせた適切な装置を選択できます。


Interceptive Treatment 成長抑制用装置

Age: 2-6 or 6-12

Max A® マックス A


Age: 2-6 or 6-12

乳歯、または初期の混合歯列期において前歯部の是正と、臼歯部のクロスバイトに特に効果的です。

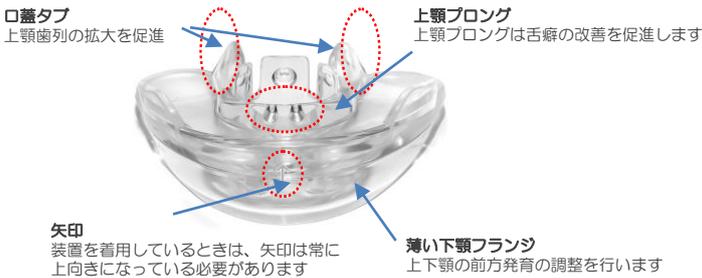

Class III Corrector® クラス III コレクター

クラス III コレクターは、仮性クラスIIIの状態を修正し、骨格性のクラスIIIへの悪化を最小限に抑えるように設計されています

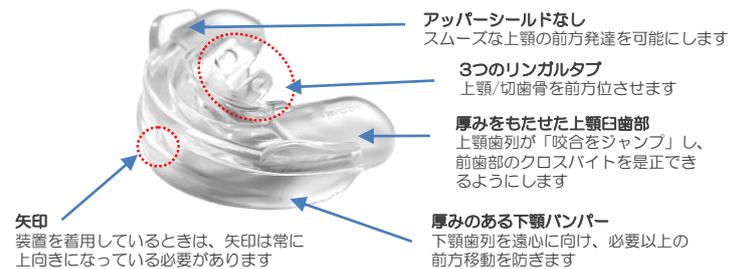


Habit Corrector 習癖是正用装置

ハビット コレクター

Age: 2-4, 4-6, 6-12, or older

ハビット コレクターは、口呼吸、舌突出癖、およびその他の軟組織の問題などによる不適切な習癖を是正して歯列を良好に発達させるように設計された装置です。永久歯が存在するか萌出している場合は他の装置と組み合わせ、通常1~6か月間着用します。

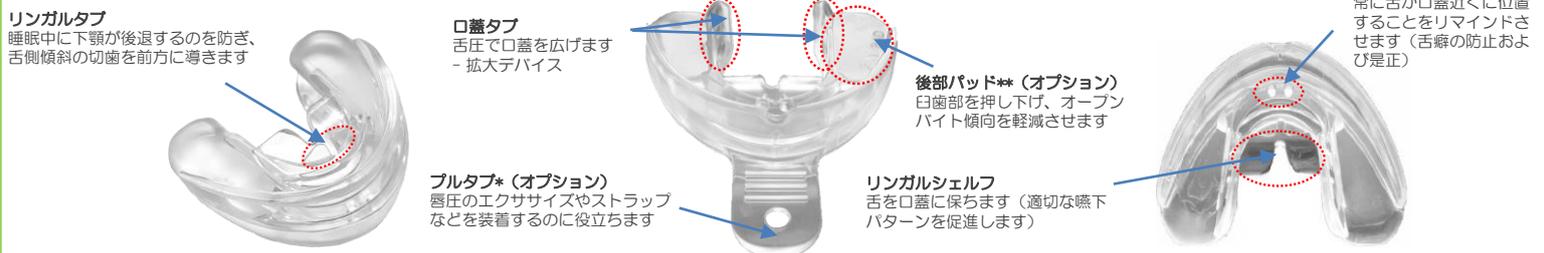

フルタブ*: フルタブ (アダルト用の ハビット コレクターを除くすべてのサイズで利用可能) は、フルタブを引っ張るときは唇を強く圧迫し、筋肉を利用して装置を口腔内にしっかりと保つ必要があります。また、フルタブにストラップなどを装着し、装置の紛失を防ぐことができます。

後部パッド**: 後部パッドを備えたハビット コレクターは、臼歯部を若干押し下げ、前歯部への干渉を起こさずにオープンバイトを是正するために装置の後面に厚みを与えています。オープンバイト症例に使用されます。

ハビット コレクターには、次のサイズとバリエーションがあります。

- Toddler Habit Corrector®** 2~4歳前後の患者向け
幼児用ハビット コレクター
- Youth Habit Corrector®** 7~11歳前後の患者の場合で、混合歯列、第1大臼歯が存在するケース
学童期用ハビット コレクター
- Pedo Habit Corrector®** 4~6歳前後の患者の場合で、乳歯列、第1大臼歯が存在しないケース
小児用ハビット コレクター
- Adult Habit Corrector®** 12歳以上の患者で、永久歯列、第2大臼歯が存在するケース
大人用ハビット コレクター

<お問い合わせ・製造販売元> フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

製品についてのお問い合わせ、ご相談は…… TEL. 03-6277-6980 <http://www.forestadent.co.jp>



ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名			
〒	—		
電話	()	FAX	()
e-mail	@		

クラスⅢ コレクター		各 ¥7,800 / 個 (税抜)
製品番号	規格	注文数
OT-CLASSⅢ40A	クラスⅢコレクター サイズ 2-6	
OT-YCLASSⅢ40A	クラスⅢコレクター サイズ 6-12	

マックスA		各 ¥7,800 / 個 (税抜)
製品番号	規格	注文数
OT-MAXA40A	マックス A サイズ 2-6	
OT-YMAXA40A	マックス A サイズ 6-12	

ハビット コレクター		各 ¥7,600 / 個 (税抜)
製品番号	規格	注文数
OT-HCCT40AT	ハビット コレクター 幼児用	

製品番号	規格	注文数
OT-HCCP40-B	ハビット コレクター キッズ	
OT-HCCP40-BP	ハビット コレクター キッズ パッド付	
OT-HCCP40-BT	ハビット コレクター キッズ プルタブ付	
OT-HCCP40-BPT	ハビット コレクター キッズ パッド/プルタブ付	

製品番号	規格	注文数
OT-HCCY40-B	ハビット コレクター ユース	
OT-HCCY40-BP	ハビット コレクター ユース パッド付	
OT-HCCY40-BT	ハビット コレクター ユース プルタブ付	
OT-HCCY40-BPT	ハビット コレクター ユース パッド/プルタブ付	

製品番号	規格	注文数
OT-HCCA40AN	ハビット コレクター アダルト	
OT-HCCA40BP	ハビット コレクター アダルト パッド付	