

優れた耐久性をもった歯列矯正用審美ワイヤー

革新的なハイブリッド コーティングを採用

新しいダニー オースホワイトワイヤーは先端技術を使用して耐摩耗性を向上させた独自の技術を採用した新しい歯列矯正用審美ワイヤーです。



ORTHOWHITE WIRE

ダニー オースホワイト ワイヤー

ダニー オースホワイト ワイヤーは、歯列矯正用審美ワイヤーに求められる、生体適合性、耐久性、審美性、低摩擦を実現するため、内層にシルバー(Ag)とジルコニウム(Zr)、そして外層にはバイオポリマーを使用。これらを高いレベルで融合させた新しい審美ワイヤーです。

コアワイヤー → NiTi, SS ワイヤー


新しいダニー オースホワイト ワイヤーのコアワイヤーは、ニッケルチタンワイヤー、およびステンレススチールワイヤーを採用。豊富なサイズによって治療初期から治療の最終まで審美性を持続できます。

内層 → ハイブリッド (Zr + Ag)

コアワイヤーと外層(生体適合性ポリマー)の間の接着性を高めるため、シルバーとジルコニウムによるハイブリッドのコーティング層を形成しています。超薄層により、コアワイヤーのサイズには影響せずに強い耐久性を保ちます。

外層 → 生体適合性ポリマー

バイオポリマー(生体高分子・パリン樹脂)は、人体の中で永久的な使用を目的とする人工心臓の外側を覆うのに用いられるFDA認可のクラス4材料です。自然な歯牙の色合いにも溶け込む重要なコンポーネントとなっています。日本人の歯冠色にマッチしたコーティングカラーを採用。

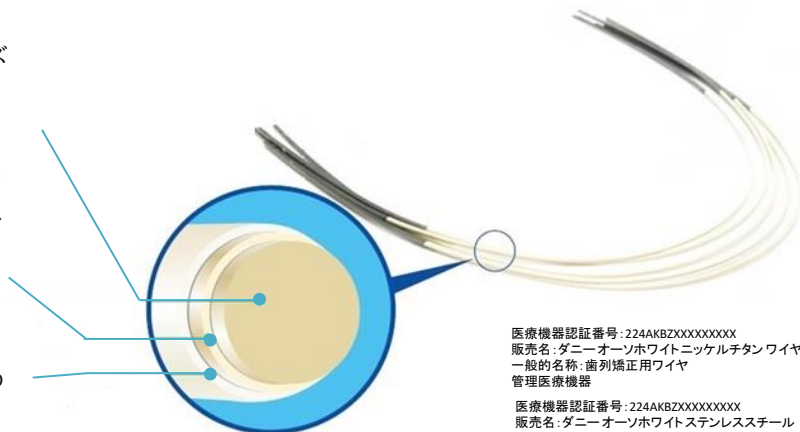

医療機器認証番号: 224AKBZXXXXXXX
販売名: ダニー オースホワイトニッケルチタンワイヤー
一般名称: 歯列矯正用ワイヤー
管理医療機器

医療機器認証番号: 224AKBZXXXXXXX
販売名: ダニー オースホワイトステンレススチールワイヤー
一般名称: 歯列矯正用ワイヤー
管理医療機器

製造販売元:

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル 2F

TEL : 03-6277-6980

FAX : 03-3568-8864

info@forestudent.co.jp

http://www.forestudent.co.jp

製造元:

DANY BIO MEDICAL TECH Co.,Ltd.

FAXご注文書



FAX 03-3568-8864

フォレストデント・ジャパン株式会社 行き

ORTHOWHITE WIRE ダニー オーソホワイト ワイヤー

ご注文日: 年 月 日

お名前 / 医院名	
〒	—
電話 ()	FAX ()
Mail	@

1PK(10本入り)

 NiTi Round	上顎用	注文番号	注文数	下顎用	注文番号	注文数
	.012	DCW-NNSU-0012		.012	DCW-NNSL-0012	
	.014	DCW-NNSU-0014		.014	DCW-NNSL-0014	
	.016	DCW-NNSU-0016		.016	DCW-NNSL-0016	
	.018	DCW-NNSU-0018		.018	DCW-NNSL-0018	
	.020	DCW-NNSU-0020		.020	DCW-NNSL-0020	

1PK(10本入り)

 NiTi Rectangular	上顎用	注文番号	注文数	下顎用	注文番号	注文数
	.016 x .016	DCW-NNSU-1616		.016 x .016	DCW-NNSL-1616	
	.016 x .022	DCW-NNSU-1622		.016 x .022	DCW-NNSL-1622	
	.017 x .025	DCW-NNSU-1725		.017 x .025	DCW-NNSL-1725	
	.018 x .025	DCW-NNSU-1825		.018 x .025	DCW-NNSL-1825	
.019 x .025	DCW-NNSU-1925		.019 x .025	DCW-NNSL-1925		

1PK(10本入り)

 SS Round	上顎用	注文番号	注文数	下顎用	注文番号	注文数
	.012	DCW-SNU-0012		.012	DCW-SNL-0012	
	.014	DCW-SNU-0014		.014	DCW-SNL-0014	
	.016	DCW-SNU-0016		.016	DCW-SNL-0016	
	.018	DCW-SNU-0018		.018	DCW-SNL-0018	
.020	DCW-SNU-0020		.020	DCW-SNL-0020		

1PK(10本入り)

 SS Rectangular	上顎用	注文番号	注文数	下顎用	注文番号	注文数
	.016 x .016	DCW-SNU-1616		.016 x .016	DCW-SNL-1616	
	.016 x .022	DCW-SNU-1622		.016 x .022	DCW-SNL-1622	
	.017 x .025	DCW-SNU-1725		.017 x .025	DCW-SNL-1725	
	.018 x .025	DCW-SNU-1825		.018 x .025	DCW-SNL-1825	
.019 x .025	DCW-SNU-1925		.019 x .025	DCW-SNL-1925		

ご注文

FAX 03-3568-8864

お問い合わせ

TEL 03-6277-6980