

NEW! QuicKlear® III
The third generation
active ceramic bracket!

It's **NEW!!**



ロープロファイル デザイン

クイックリアー III

セルフライゲーション セラミック ブラケット

It's
NEW!!

クイックリアー III

セルフライゲーション セラミック ブラケット


クイックリアーIIIは審美性と安定したメカニクスを可能にする
セルフライゲーション セラミック ブラケットです。

医療機器認証番号:221AKBZX00115000
販売名:フォレストデントクイックリアーブラケット



第3世代のクイックリアー セルフライゲーション セラミック ブラケット“クイックリアーIII”は、従来品と比較してロープロファイルとなり、さらにフックの形状、より丸みを加えたブラケット デザインによって、口腔内での快適性が向上しました。

ロープロファイル デザイン

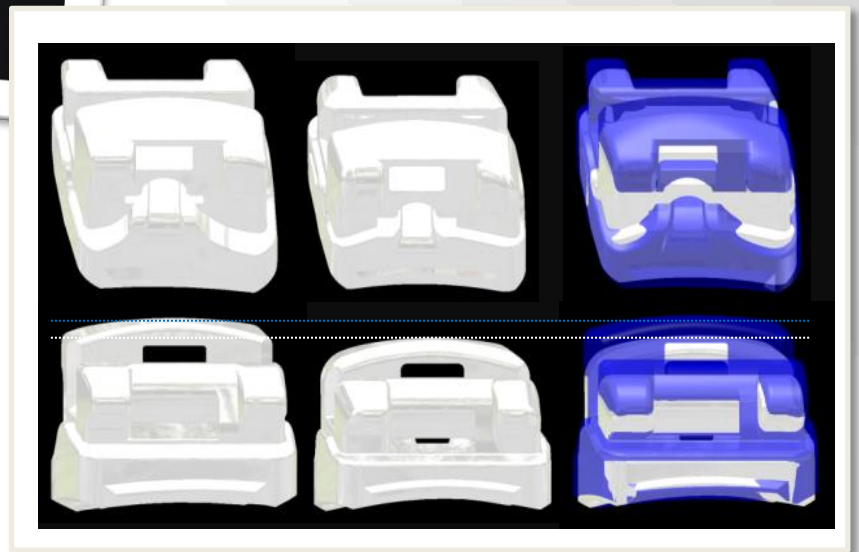

従来デザイン

クイックリアーIII

重ね合わせ

スロットはインターアクティブタイプで、ワイヤーサイズが .018” x .018” 又は、.016” x .022” まではパッシブな状態となり、ワイヤーサイズが .018” x .025” (.018 スロット)、又は、.022” x .025” (.022 スロット) になると完全なアクティブな状態となり効果的なトルクコントロールが可能となります。




クリップデザインの 改善



従来デザイン




クイックリアーⅢ

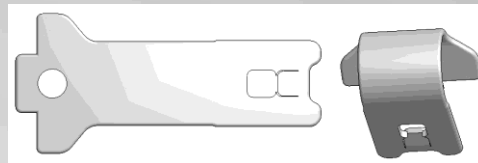

安定した機能（開け閉め）を発揮するクリップのデザインと厚みを変更しさらなる強度を持たせました。これにより比較的長期にわたる治療においても安定した開閉とワイヤーコントロールを実現します。さらにメタル表面をマット仕上げにすることで審美性を向上させました。

新たに下顎小臼歯ブラケット の追加

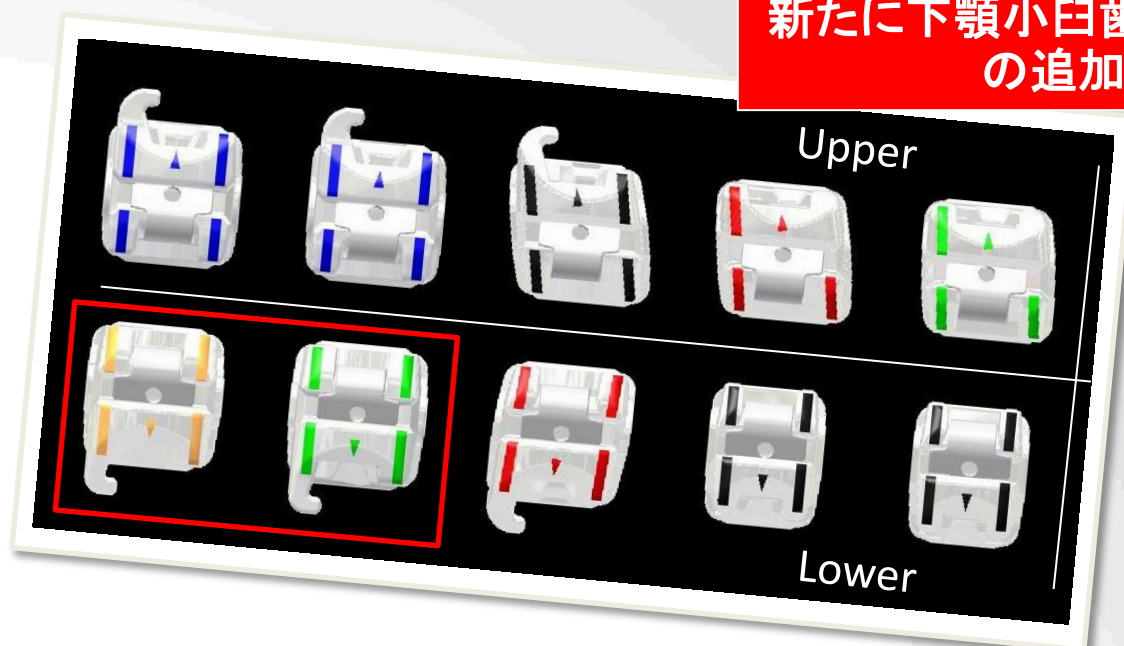

“クイックリアーⅢ”では今回新たに下顎小臼歯も追加。これにより上下顎5-5がすべてセラミック製のセルフライゲーションシステムとなり、審美性においてもご満足いただけるブラケットシステムとなりました。

容易なブラケット撤去

専用のブラケット撤去用インスツルメントを利用してセラミックブラケットを容易に撤去します。特殊デザインのブラケットベースは安全なブラケット撤去を可能にします。



Improved
Aesthetic !!




クイックリアーIIIでは下顎小臼歯ブラケットが新たに追加。
より審美性の高いブラケット システムとなりました。

従来システム


クイックリアーIIIは以下の3種類のスペックからご選択できます。

Roth System*


Roth System、及びMcLaughlin/Bennett/Trevisi Systemの大臼歯はクイックモラー メタル セルフライゲーション ブラケットになります。

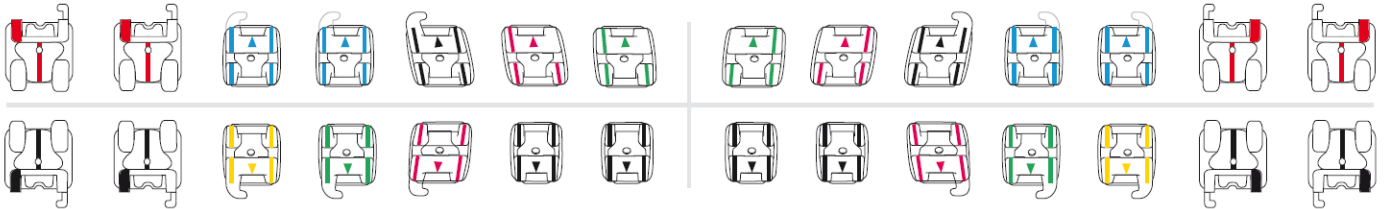

McLaughlin/Bennett/Trevisi System*

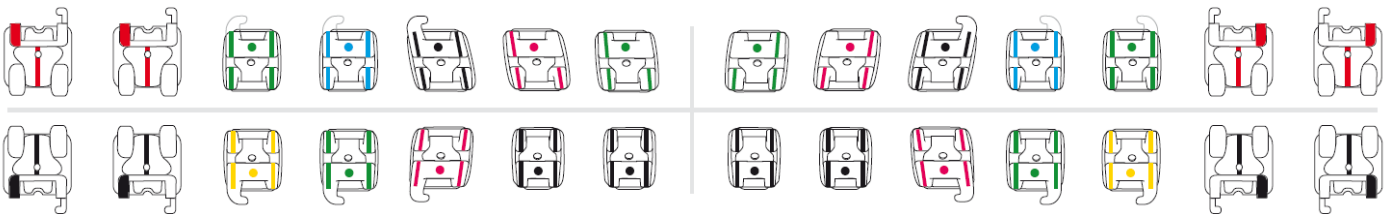

FACE Evolution System

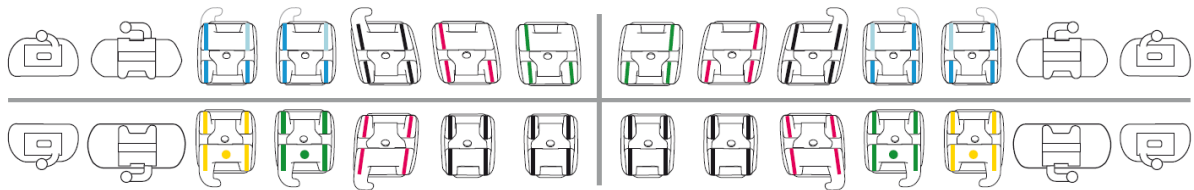

*The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor does Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

ドイツ FORESTADENT社 日本総代理店

フォレストudent・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F FAX. 03-3568-8864 E-mail: info@forestadent.co.jp

新製品・その他のお問い合わせは・・・

TEL.03-6277-6980 | <http://www.forestadent.co.jp>